

ORIGINAL nach Mittelmeier / Becker
AKTIV-Spreizhose
AKTIV mit Beuge-Vorhaltekeile

Indikation:
 Zur gefahrlosen Behandlung der
 angeborenen Hüftdysplasie & Luxation

Original
AKTIV- Spreizhose



Größe Art.Nr.:

10	300-10
12	300-12
14	300-14
16	300-16
18	300-18
20	300-20
22	300-22
24	300-24
26	300-26
28	300-28

AKTIV mit Beuge-Vorhaltekeile
nach Prof.Mittelmeier



10	400-10
12	400-12
14	400-14
16	400-16
18	400-18
20	400-20
22	400-22
24	400-24
26	400-26
28	400-28



Eigenschaften:


Die Aktiv-Spreizhose/ AKTIV mit Beuge-Vorhaltekeile, besteht aus 1 mm starker perforierter Polyethylen-Folie mit nach unten divergierendem Zuschnitt. Dadurch ist keine Fixierung der Beine erforderlich und die Abspreizung ist auf maximal 60 Grad begrenzt.

Die Seitenränder der AKTIV-Spreizhose/AKTIV mit Beuge-Vorhaltekeile sind mit Schaumstoff und Kunstlederband abgepolstert um Kantendruck entgegenzuwirken.

Die im Brust und Rückenbereich angebrachten Klettverschlüsse und fest einstellbare Träger mit Kunststoff-Steckschließen, garantieren einen sicheren Sitz der AKTIV-Spreizhose/AKTIV mit Beuge-Vorhaltekeile.

**** **Original AKTIV mit Beuge-Vorhaltekeile** hat zusätzlich Rechts und Links angebrachte Beuge-Vorhaltekeile auch Schaumstoff umhüllt in einem beschichteten, wasserabweisenden Gewebe. Durch den nach unten divergierenden Zuschnitt der Aktiv-Spreizhose mit Beuge-Vorhalte-Keile, wird die Beugung der kindlichen Hüfte gewährleistet,

Beuge-Vorhalte-Keile →

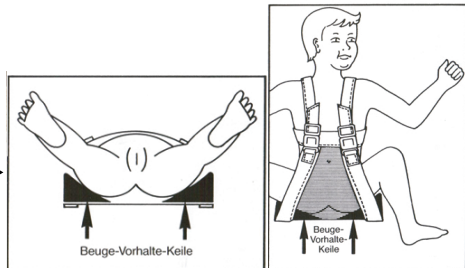

und eine Überspreizung ist nicht möglich.

Die Beuge-Vorhaltekeile lassen sich durch Klettverschlüsse individuell einstellen.

Einfachste Handhabung durch seitliche Klettverschlüsse und einstellbare Träger mit Kunststoff-Steckschlüssen.

Größen in cm.

Erhältlich in Größen 10 bis 28.

Spreizweite von 10 cm bis 28 cm in 2 cm Abstand.

Hautverträglich

*Die AKTIV- Spreizhose/AKTIV mit Beuge-Vorhaltekeile besteht aus hautverträglichen leicht zu reinigend Materialien.

*Die durchgehende Perforierung des Polyethylen - Materials verhindert Wärmestau.

*Da die AKTIV-Spreizhose/AKTIV mit Beuge-Vorhaltekeile grundsätzlich über der Babybekleidung getragen wird, kann es zu keiner Flüssigkeitsansammlung zwischen Haut und Spreizhose kommen.

Material-Zusammensetzung:

*Schale: PE-Folie mit Schaumstoff- & Kunstlederabpolsterung.

*Träger: Beschichtetes abwaschbares Baumwollgewebe

*Verschlüsse: Kunststoffstecker aus PE

*Klettverschlüsse: Velcro, Polyester

